

Comunicación Avanzada vía Solución de Monitoreo de Telemetría

Como un accesorio opcional del monitor fetal, el sistema de telemetría FTS-3 con sus transductores ligeros e impermeables proporciona una monitorización sin fisuras durante el proceso de parto y la futura madre podría cambiar fácilmente varias posiciones para reducir el dolor de parto.

- Soporta monitoreo fetal gemelar inalámbrico
- Soporta detección inalámbrica DECG/MECG (todavía no disponible para el mercado de los EE.UU.)
- Transductor impermeable de IPX8 sin cable para parto en agua
- Tecnología de transmisión en frecuencia de radio



Serie F9

Monitor Fetal & Maternal

Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Imágenes de Ultrasonido
- Diagnóstico In-Vitro
- Monitoreo de Paciente
- Pruebas Point-of-Care
- Veterinaria
- Obstetricia y Ginecología

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.



Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Comunidad Jinsha,
Subdistrito Kengzi, Distrito Pingshan, Shenzhen | 518122, P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2017 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito.



SPA-OB&GYN-F9 series-V1-20170801

Monitoreo para Ambos Madre y Feto

Serie F9

Monitor Fetal & Maternal





La pantalla táctil tiene un ajuste de inclinación de 60° para que siempre tenga el ángulo óptimo de visión en la cabecera.




La intuitiva interfaz táctil en color de 12.1" le permite cambiar rápidamente los parámetros en situaciones críticas.



Simplifique el flujo de trabajo configurando el botón de inicio para incluir tanto la información del paciente como la impresión



El análisis CTG de anteparto proporciona una evaluación objetiva por la referencia de los cuidadores y asegura un fácil acceso para leer las tendencias de FHR

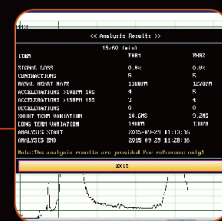

Rendimiento en Todas las Fases

El Monitor Fetal y Maternal F9 Express utiliza un transductor impermeable de 12 cristales y 1.0 MHz para producir un haz de ultrasonido más amplio con una señal más homogénea para un rendimiento avanzado en todas las fases del proceso de parto.

- Anteparto: antes del parto, detección de la frecuencia cardíaca fetal, así como de la frecuencia cardíaca materna para diferenciar las superposiciones de señales.
- Intraparto: durante el parto, la serie F9 apoya la condición de nacimiento intensiva y mantiene consistentemente los resultados de la monitorización.
- Postparto: después del parto, el estado de salud de las nuevas madres sigue siendo crítico y sus signos vitales deben seguir vigilando.

Parámetros de Monitorización Integrados

El modelo F9 Express integra parámetros hemodinámicos tanto para la madre como para el feto proporcionando una solución de monitoreo rentable y completa. La pantalla táctil de alta resolución contiene modos de visualización seleccionables por el usuario que le permiten mostrar la combinación de información más adecuada para la situación clínica.

- Fetal: FHR gemelas, actividad uterina, movimiento fetal, presión intrauterina, DECG
- Maternal: NIBP, SpO2, HR, ECG, TEMP



El Primer Sistema de Telemetría Fetal Gemelar

Para el seguimiento de la futura madre en camino, el sistema de telemetría FTS-3 permite monitoreo continuo sin cables de interferencia. El método de monitorización inalámbrica es favorable en específico durante el período de parto, la futura madre podría ser libre de cambiar la posición del cuerpo, lo que en gran medida ayuda a reducir el dolor de parto. Transductores inalámbricos proporcionan una gran flexibilidad y movilidad no sólo para las madres, sino también para los cuidadores, varios servicios de partos, tales como el parto en agua, el cual sería más fácil de manipular.