


## Otoscopios

Los prácticos otoscopios F.O. ri-mini® y pen-scope® sirven para iluminar y explorar el conducto auditivo. Un sistema innovador de fibra óptica permite una concentración óptima de la luz. La iluminación directa ofrece una reducción de reflexión minimizada y una iluminación mejorada. De este modo pueden iluminarse zonas de difícil acceso con una luz similar a la diurna. Los excelentes materiales y el esmerado proceso de fabricación garantizan una elevada fiabilidad en todas las exploraciones.



La fibra óptica permite una visión sin obstáculos ni deslumbramiento. La excelente transmisión de la luz proporciona la mejor iluminación posible, incluso en zonas de difícil acceso.

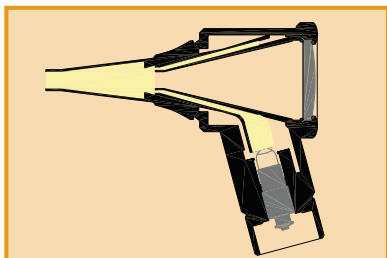

Los otoscopios ri-mini® F.O. y pen-scope® permiten iluminar y explorar con precisión el conducto auditivo.



### Otoscopio F.O. ri-mini®

- Con lámpara halógena HL de 2,5 V.
- Fibra óptica para una concentración y transmisión óptimas de la luz. En combinación con la lámpara, proporciona una luz de exploración fría similar a la luz diurna, muy agradable para el paciente.
- Lupa desmontable de 2,5 aumentos.
- Con la lupa desmontada pueden introducirse instrumentos externos.
- Cierre de rosca para un montaje seguro en el mango.
- Resistente anillo de ajuste para colocar el cabezal en la posición ideal con respecto al mango.
- Sistema estanco para la realización de otoscopia neumática.
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, extremadamente resistente.
- Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento.
- Incluye espéculo auricular de 4 mm.
- Entrada de espéculos compatible con espéculos de otros fabricantes de renombre.

■ N° 10502	negro
■ N° 10500	gris pizarra
■ N° 10504	azul
■ N° 10505	azafrán
■ N° 10506	verde


**NUEVO**



### Otoscopio pen-scope®

- Con iluminación directa 2,5 V vacío o 2,5 V HL halógena.
- Fácil cambio de bombilla a través de desatornillar la entrada de espéculos.
- Entrada de espéculos compatible con espéculos de otros fabricantes de renombre.
- Las demás características son idénticas a las del cabezal ri-mini®.

■ N° 10490	negro 2,7 V
■ N° 10491	negro 2,5 V HL
■ N° 10492	gris pizarra 2,7 V
■ N° 10493	gris pizarra 2,5 V HL
■ N° 10494	azul 2,7 V
■ N° 10495	azul 2,5 V HL
■ N° 10496	azafrán 2,7 V
■ N° 10497	azafrán 2,5 V HL
■ N° 10498	verde 2,7 V
■ N° 10499	verde 2,5 V HL

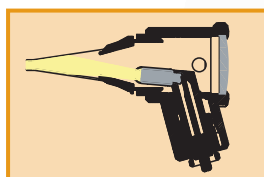

Iluminación directa para reflexión minimizada y visión mejorada

## Fuentes de electricidad



### Mango para pilas tipo AA

sin pilas

para ri-mini®, pen-scope® y fortelux® H

- Para 2 pilas tipo AA.
- Cierre de rosca para una fijación segura de los cabezales.
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, extremadamente resistente.
- Práctica pinza metálica de acero inoxidable para fijar el instrumento a la bata.
- Cómodo encendido y apagado con el interruptor deslizante de la pinza.
- Diámetro del mango: 19 mm.

- N° 10651
- N° 10650
- N° 10474
- N° 10652
- N° 10653

negro  
gris pizarra  
azul  
azafrán  
verde

Pila alcalina 1,5 V, tipo AA, envase de 4 unidades



N° 10685

## Conjuntos

Los conjuntos ri-mini® y pen-scope® son ayudas para la exploración en formato de bolsillo. Los instrumentos fiables de alta calidad y tamaño manejable se guardan con facilidad y están siempre al alcance de la mano.



El elegante estuche negro está equipado con sólidos cierres deslizantes de seguridad.

### Conjuntos ri-mini®



#### Otoscopio F.O. ri-mini® HL 2,5 V

en estuche rígido con dos cierres deslizantes de seguridad

- Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2,5 mm y cinco de 4 mm.
- Mango para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

- N° 3010
- N° 3000
- N° 3003
- N° 3004
- N° 3005

negro  
gris pizarra  
azul  
azafrán  
verde



#### Otoscopio ri-mini® HL 2,5 V

en estuche rígido con dos cierres deslizantes de seguridad

- Mango para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

- N° 3011
- N° 3001
- N° 3006
- N° 3007
- N° 3008

negro  
gris pizarra  
azul  
azafrán  
verde



#### Otoscopio/oftalmoscopio F.O. ri-mini® HL 2,5 V

en estuche rígido con dos cierres deslizantes de seguridad

- Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2,5 mm y cinco de 4 mm.
- Mangos para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

- N° 3012
- N° 3002
- N° 3009
- N° 3013
- N° 3014

negro  
gris pizarra  
azul  
azafrán  
verde



#### Otoscopio/oftalmoscopio F.O. ri-mini® + fortelux® H, HL 2,5 V, incl. soporte para depresor lingual

en bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón

- Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2,5 mm y cinco de 4 mm.
- Mangos para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

- N° 3025-524
- N° 3026-524
- N° 3027-524
- N° 3028-524
- N° 3029-524

negro  
gris pizarra  
azul  
azafrán  
verde