

Centrífugas pequeñas

# HAEMATOKRIT 200

Determinación del hematocrito en tan solo 7 minutos

La HAEMATOKRIT 200 es una centrífuga compacta y eficiente para la determinación de la proporción volumétrica de eritrocitos en sangre. Velocidad de hasta 13,000 RPM / 16.060 RCF. Capacidad hasta 24 capilares. En menos de siete minutos se ha alcanzado la densidad de compactación máxima de las células.

Resultados se muestran claramente con la ayuda de la tapa del rotor que incorpora un disco lector.



ROTOR  
INCLUIDO



## Beneficios

- RPM: 200 - 13.000 min<sup>-1</sup>  
Ajustable hasta 10,000 RPM en pasos de 10, arriba en pasos de 100
- RCF máx.: 16.060
- Capacidad máx.: 24 capilares
- Compacta Centrífuga para Hematocrito de Alto desempeño
- IVD conform de acuerdo a directiva 98/79/EC
- Nivel máximo de ruido de  $\leq 56$  dB(A)
- Tecla de pulso para modo de ciclo corto
- Etapas de aceleración y desaceleración 2
- Fácil operación con el teclado

## Características

- Carcasa plástica
- Tapa metálica
- Puerto de validación en la Tapa
- Cierre de tapa de una mano
- Protección contra caídas de la tapa
- Liberación de emergencia del bloqueo de la tapa
- Cámara de metal ligero
- Accionamiento sin colector
- Indicación de errores
- Monitoreo de desbalanceo y desconexión
- Panel retroiluminado con valores reales de todos los parámetros
- 2 mensajes ajustables después de completar el ciclo de centrifugación (audible + visual)

## Datos técnicos

### HAEMATOKRIT 200

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Voltaje *)                                | 200 – 240 V 1 ~                                                 |
| Frecuencia                                | 50 – 60 Hz                                                      |
| Consumo                                   | 270 VA                                                          |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | EN/IEC 61326-1, clase B                                         |
| Capacidad máx.                            | 24 capilares                                                    |
| RPM máx.                                  | 13.000 min <sup>-1</sup>                                        |
| RCF máx.                                  | 16.060                                                          |
| Tiempo de programación                    | 1 – 99 min, ∞ marcha permanente, marcha corta (botón ,impulso') |
| Dimensiones (An x P x A)                  | 261 x 353 x 228 mm                                              |
| Peso                                      | ca. 10 kg                                                       |
| Nivel de ruido máx.                       | ≤ 56 dB (A)                                                     |
| <b>Nº referencia</b>                      | <b>1801</b>                                                     |

100 – 127 V 1 ~ / 50–60 Hz

1801-01

Emisión, Resistencia a las interferencias


FCC clase B

\*) Otros voltajes a petición.

## Rotor de disco, 24 posiciones | 2076

### Rotor

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| RPM máx.   RCF máx.              | 13.000 min <sup>-1</sup>   16.060 |
| Capacidad máx.                   | 24 capilares                      |
| Aceler.   Deceler. en s, frenado | 9   16                            |
| Escuadras   Nivel de ruido máx   | 90°   56 dB (A)                   |
| Tapa de medición                 | incluido                          |
| <b>Nº referencia</b>             | <b>INCLUIDO</b>                   |

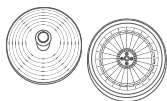

### Capilares Básico

|                        |        |
|------------------------|--------|
| RCF máx. <sup>2)</sup> | 16.060 |
| Radio en mm            | 85     |



### Adaptador

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Taladro Ø x L en mm   | -        |
| Recipientes por rotor | 24       |
| <b>Nº referencia</b>  | <b>-</b> |

### CARCASAS DE TAPICERÍA

Las diferentes cápsulas de recepción en el rotor 2076 son fáciles de limpiar en caso de tubos capilares con pérdidas y de sencillo intercambio si el vidrio se rompiera.



2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotores. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a los fabricantes respectivos.

## Certificaciones / Registros

Certificación de productos:



Registro de productos:



Certificaciones de la empresa:



## Dimensiones

